




**BIOPTRON<sup>®</sup>**   
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

FILTROS  
ESPAÑOL (ES)

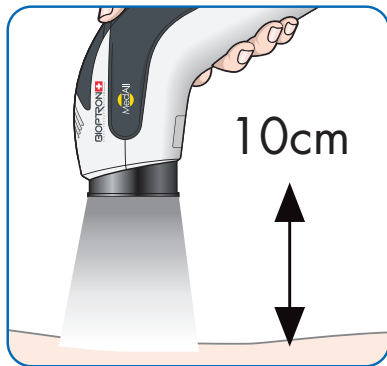

1



2



3



4

## ¿CÓMO SE UTILIZA?

Desde una distancia de 10 cm, coloque el dispositivo BIOPTRON con el filtro deseado para cubrir el área que desea tratar (Imagen 1). Cuando trate zonas más grandes que el diámetro del filtro de color, trátelas una a una según el tiempo recomendado.

## ¿CÓMO CAMBIAR EL FILTRO?

Saque con cuidado y sin forzar el filtro (Imagen 2) que va a cambiar e inserte el filtro de color deseado como se indica en la Imagen 3. Sujete el anillo exterior del filtro en lugar del objetivo.

## ¿CÓMO SE LIMPIA EL FILTRO? (Imagen 4)

1. Extraiga el filtro del aparato sujetando el anillo exterior del filtro.
2. Utilice un paño suave, húmedo y sin pelusas para evitar rayar la superficie de cristal.
3. Seque el filtro con otro paño sin pelusas.

## GARANTÍA:

- 5 años si se utiliza de la forma prevista y si se respetan las advertencias
- Esta garantía cubre los defectos de material y de fabricación
- Esta garantía no cubre los cambios estéticos resultantes del desgaste ordinario que no afecten al rendimiento del producto, ni los daños causados por el mal uso del mismo.

## ADVERTENCIAS

1. No utilice ningún producto químico (por ejemplo, alcohol isopropílico) para limpiar la cara interna o externa de la superficie de la lente y el anillo del filtro
2. Guarde el filtro en una bolsa protectora para evitar la acumulación de polvo y la decoloración debida a la exposición a la luz solar.
3. El filtro es de vidrio frágil, por lo que debe manipularse con cuidado.
4. El usuario no está autorizado a retirar la lente del filtro.



PMD-ME145-22-ES  
BIOPTRON FILTER IFU



**BIOPTRON AG**  
SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND  
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



**WWW.BIOPTRON.COM**

ESPAÑOL (ES)